


Bestellinformationen

Micro Sprint® Brackets McLaughlin/Bennett/Trevisi System

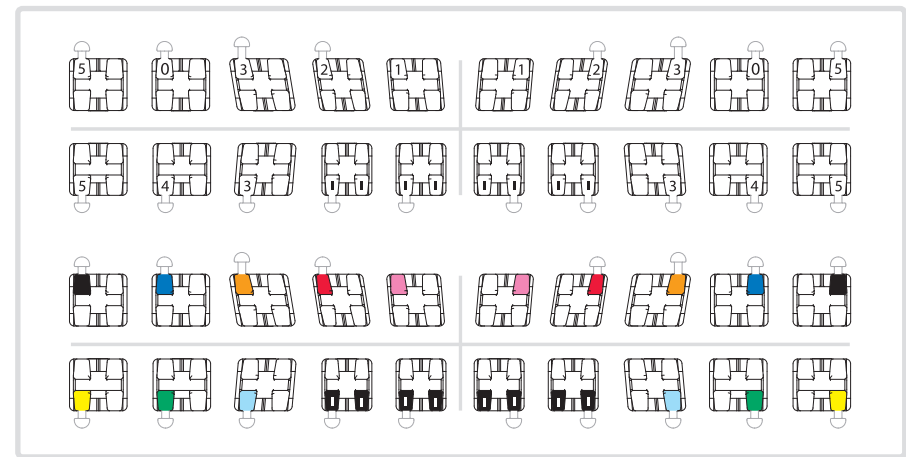

Oberkiefer					Slot .018"		Slot .022"	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Rechts	Links	Rechts	Links
1 Mittl. Schneidezahn	+17°	+4°	0,8	–	778-0103	777-0103	778-0101	777-0101
2 Seitl. Schneidezahn	+10°	+8°	1,0	–	778-0203	777-0203	778-0201	777-0201
2 Seitl. Schneidezahn + Haken	+10°	+8°	1,0	–	778-0213	777-0213	778-0211	777-0211
3 Eckzahn	-7°	+8°	0,5	–	778-0303	777-0303	778-0301	777-0301
3 Eckzahn + Haken	-7°	+8°	0,5	–	778-0313	777-0313	778-0311	777-0311
4 1. Prämolare	-7°	0°	0,5	–	778-0403	777-0403	778-0401	777-0401
4 1. Prämolare + Haken	-7°	0°	0,5	–	778-0413	777-0413	778-0411	777-0411
5 2. Prämolare	-7°	0°	0,9	–	778-0503	777-0503	778-0501	777-0501
5 2. Prämolare + Haken	-7°	0°	0,9	–	778-0513	777-0513	778-0511	777-0511

Unterkiefer					Slot .018"		Slot .022"	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Rechts	Links	Rechts	Links
1 Mittl. Schneidezahn	-6°	0°	1,2	–	777-1203	777-1203	777-1201	777-1201
1 Mittl. Schneidezahn + Haken	-6°	0°	1,2	–	778-1213	777-1213	778-1211	777-1211
2 Seitl. Schneidezahn	-6°	0°	1,2	–	777-1203	777-1203	777-1201	777-1201
2 Seitl. Schneidezahn + Haken	-6°	0°	1,2	–	778-1213	777-1213	778-1211	777-1211
3 Eckzahn	-6°	+3°	0,7	–	778-1403	777-1403	778-1401	777-1401
3 Eckzahn + Haken	-6°	+3°	0,7	–	778-1413	777-1413	778-1411	777-1411
4 1. Prämolare	-12°	+2°	0,7	–	778-1503	777-1503	778-1501	777-1501
4 1. Prämolare + Haken	-12°	+2°	0,7	–	778-1513	777-1513	778-1511	777-1511
5 2. Prämolare	-17°	+2°	0,7	–	778-1603	777-1603	778-1601	777-1601
5 2. Prämolare + Haken	-17°	+2°	0,7	–	778-1613	777-1613	778-1611	777-1611

Micro Sprint® Fallsätze McLaughlin/Bennett/Trevisi System

Variante	Slot .018"			Slot .022"		
Anzahl Fälle	1	5	10	1	5	10
Ohne Haken	706-1112	706-1113	706-1114	706-1121	706-1122	706-1123
Mit Haken 3	706-1115	706-1116	706-1117	706-1124	706-1125	706-1126
Mit Haken 3-5	706-1118	706-1119	706-1120	706-1127	706-1128	706-1129

Bestellinformationen

Zubehör

Order no.		Menge	Beschreibung
655-0015 € € 0297		1 Rolle (1,5 m)	Lingual-Elastikkette – flacher als normale Elastikketten
501-0854 € €		1	Micro Sprint® Bracket-Entfernungszange mit Kerbe
312-1001 € € 0297		1000	Vorgeformter Ligaturendraht Ø 0,2 mm, (.008")
€ €		960	Elastic-Ligaturen – klein, ideal für Micro Sprint Brackets

Wahre Größe



Micro Sprint® Brackets

Mit Micro Sprint® präsentiert FORESTADENT ein neues Mitglied der erfolgreichen Sprint® Familie. Im Vergleich zu Mini Sprint® wurde die Größe des Micro Sprint® Brackets noch einmal entscheidend reduziert. Das zurzeit kleinste Twin-Bracket der Welt zu entwickeln war jedoch nicht der

einzige Anspruch, dem die FORESTADENT Ingenieure gerecht werden mussten. Daher stecken in der Einstückkonstruktion aus hochfestem Edelstahl alle wesentlichen Merkmale, die ein Behandler von einem modernen Bracket erwarten kann.




Die Familie der FORESTADENT Sprint® Brackets im Größenvergleich zu Produkten von Wettbewerbern.

Patientenkomfort wird großgeschrieben. Viele Patienten wünschen sich eine möglichst unauffällige Behandlung. Einige sind jedoch nicht bereit, die Mehrkosten für Keramikbrackets zu tragen. Micro Sprint® bietet in diesem Fall eine attraktive Alternative: sehr klein, extrem flach und außerdem nickelfrei. Der Bracketkorpus ist optimal verrundet und dank einer speziellen Oberflächenbehandlung sehr glatt, um Irritati-

onen der Schleimhaut vorzubeugen. Seine Sloteinläufe sind abgerundet, reduzieren dadurch die Friktion und sorgen so für einen möglichst zügigen Behandlungsverlauf. Wie schon seine Vorgänger, verfügt das Micro Sprint® Bracket über eine hohe Materialdichte. Das sorgt für eine geschlossene Oberfläche und bietet Plaque und Bakterien kaum Möglichkeiten, sich festzusetzen.



Micro Sprint® – extrem klein, extrem flach.

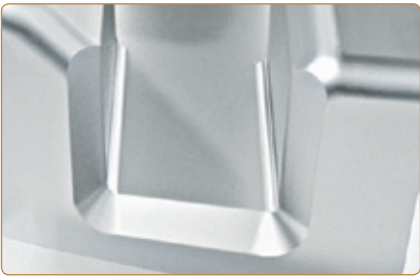

Verrundete Slotkanten



Im Vergleich zu anderen Brackets hat das Material der Micro Sprint® Brackets ein dichteres Materialgefüge mit weniger Hohlräumen und dadurch eine geschlossene Oberfläche, an der kaum Beläge anhaften

Wahre Größe kommt von innen

Ein winziges Gesamtpaket Micro Sprint® ist das derzeit kleinste erhältliche Twin-Bracket. Trotzdem verfügt es über alle wesentlichen Merkmale eines „Full-Size“-Brackets: Es ist im MIM-Verfahren aus einem Stück hochfestem Edelstahl gefertigt und mit allen gängigen Bogendimensionen kombinierbar. Ein plan gestalteter Slotboden gewährt optimale Rotations-



Micro Sprint® Brackets mit extrem flachen Lingualketten von FORESTADENT

kontrolle. Ligiert wird mit konventionellen Metall- oder Elastic-Ligaturen. Für den Einsatz von inter- oder intramaxillären Zügen erhalten Sie optional Brackets mit Haken. Trotz der geringen Größe von Micro Sprint® ist der Einsatz von Elastikketten möglich. Hierfür empfehlen wir die besonders flachen Lingualketten von FORESTADENT und die Verwendung von Metallligaturen.




Micro Sprint® Brackets mit Ligaturen aus Metall (links) und Elastics (rechts)

Gutes Handling trotz geringer Maße Durch eine permanente Markierung sowie eine Farbmarkierung auf dem distal-gingivalen Flügel sind Micro Sprint® Brackets einfach zu unterscheiden. Die permanente Markierung der Mittellinie und die rhomboide Form helfen beim einfachen Positionieren des Brackets auf dem Zahn. Die anatomisch gewölbte Bracketbasis folgt der natürlichen Oberfläche der Krone und liegt

dadurch bestmöglich auf. Für optimale Retention trotz kleinerer Pad-Dimension sorgt die patentierte FORESTADENT Hakenbasis. Das Debonding kann auf herkömmlichem Wege erfolgen, jedoch ist der Einsatz einer speziellen Debonding-Zange möglich: mit ihr kann Micro Sprint® sogar mit eingelegtem Drahtbogen entfernt werden. Hierfür wurden spezielle Debonding-Schrägen an der mesialen und distalen Seite vorgesehen.



Markierungen erleichtern die Unterscheidung und dienen als Setzhilfe

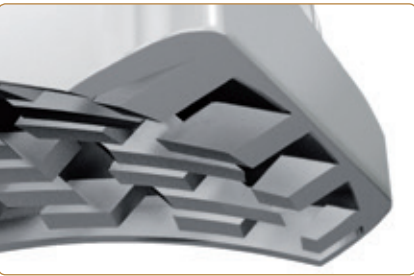


Patentierte Hakenbasis und mesio-distale Schrägen

Verfügbare Versionen Erhältlich ist Micro Sprint® für die Techniken McLaughlin/Bennett/Trevisi und Roth; jeweils mit den Slotgrößen .018“ und .022“. Haken für den Einsatz von inter- und intramaxillären Zügen erhalten Sie optional und ohne Aufpreis für OK 2-5 und UK 1-5.

Bestellinformationen

Micro Sprint® Brackets Roth System

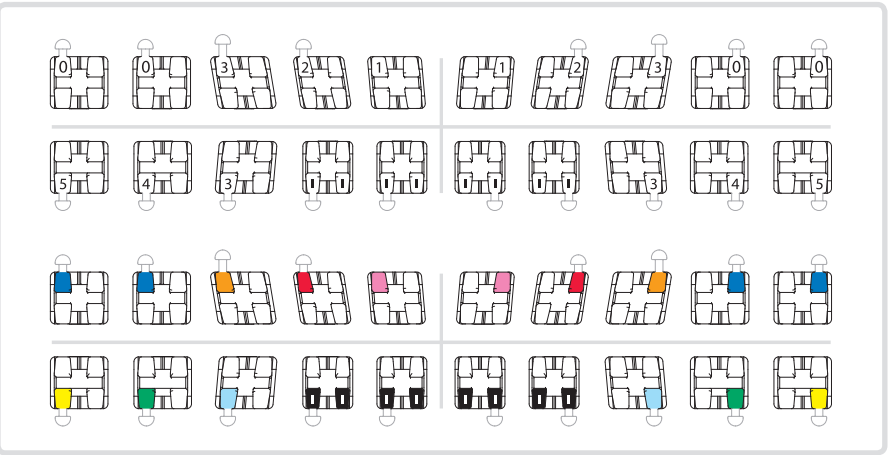

Oberkiefer						Slot .018“		Slot .022“	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation		Rechts	Links	Rechts	Links
1	Mittl. Schneidezahn	+12°	+5°	0,7	–	784-0103	783-0103	784-0101	783-0101
	Seitl. Schneidezahn	+8°	+9°	1,0	–	784-0203	783-0203	784-0201	783-0201
2	Seitl. Schneidezahn + Haken	+8°	+9°	1,0	–	784-0213	783-0213	784-0211	783-0211
	Eckzahn	-2°	+11°	0,5	4° mesial	784-0303	783-0303	784-0301	783-0301
3	Eckzahn + Haken	-2°	+11°	0,5	4° mesial	784-0313	783-0313	784-0311	783-0311
	1. Prämolare	-7°	0°	0,5	2° distal	784-0503	783-0503	784-0501	783-0501
4	1. Prämolare + Haken	-7°	0°	0,5	2° distal	784-0513	783-0513	784-0511	783-0511
	2. Prämolare	-7°	0°	0,5	2° distal	784-0503	783-0503	784-0501	783-0501
5	2. Prämolare + Haken	-7°	0°	0,5	2° distal	784-0513	783-0513	784-0511	783-0511

Unterkiefer						Slot .018“		Slot .022“	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation		Rechts	Links	Rechts	Links
1	Mittl. Schneidezahn	0°	0°	1,2	–	783-1203	783-1203	783-1201	783-1201
	Mittl. Schneidezahn + Haken	0°	0°	1,2	–	784-1213	783-1213	784-1211	783-1211
2	Seitl. Schneidezahn	0°	0°	1,2	–	783-1203	783-1203	783-1201	783-1201
	Seitl. Schneidezahn + Haken	0°	0°	1,2	–	784-1213	783-1213	784-1211	783-1211
3	Eckzahn	-10°	+7°	0,7	2° mesial	784-1403	783-1403	784-1401	783-1401
	Eckzahn + Haken	-10°	+7°	0,7	2° mesial	784-1413	783-1413	784-1411	783-1411
4	1. Prämolare	-17°	0°	0,7	4° distal	784-1503	783-1503	784-1501	783-1501
	1. Prämolare + Haken	-17°	0°	0,7	4° distal	784-1513	783-1513	784-1511	783-1511
5	2. Prämolare	-22°	0°	0,7	4° distal	784-1603	783-1603	784-1601	783-1601
	2. Prämolare + Haken	-22°	0°	0,7	4° distal	784-1613	783-1613	784-1611	783-1611

Micro Sprint® Fallsätze Roth System

Variante	Slot .018“			Slot .022“		
Anzahl Fälle	1	5	10	1	5	10
Ohne Haken	706-1094	706-1095	706-1096	706-1103	706-1104	706-1105
Mit Haken 3	706-1097	706-1098	706-1099	706-1106	706-1107	706-1108
Mit Haken 3-5	706-1100	706-1101	706-1102	706-1109	706-1110	706-1111