

IT'S ALL ABOUT THE CLIP...

**BioQuick®**


5ª generación

[www.forestadent.com](http://www.forestadent.com)

**FORESTADENT®**  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# BioQuick®

It's all about the Clip...

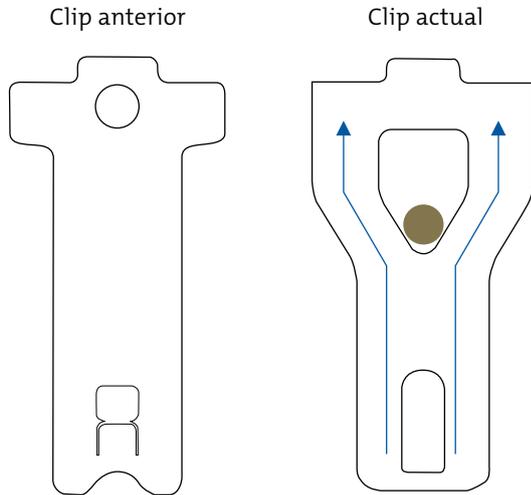


El clip actual conserva su anchura original, pero se ha optimizado y ampliado en la zona de mayor tensión. Como resultado, puede absorber más fuerza y se deforma menos.


## Las ventajas:

- El orificio más grande en el clip permite una apertura más fácil con herramientas convencionales como la sonda e incluso el explorador. También hemos creado un nuevo instrumento para una apertura aún más segura.
- El punto de aplicación de la fuerza se ha optimizado. Esto significa que se requiere menos fuerza y al mismo tiempo se ejerce menos estrés sobre el material.
- El nuevo diseño del clip permite una mayor superficie de uso de la ranura permitiendo un mejor control de la rotación y la angulación, mientras que, al mismo tiempo se ha hecho más pequeño.
- Existen cuatro variantes de Clip para diferentes angulaciones del bracket: ahora el bracket se abre de forma sencilla e intuitiva a lo largo del eje longitudinal.

La apertura del nuevo clip se realiza en dirección a la angulación:

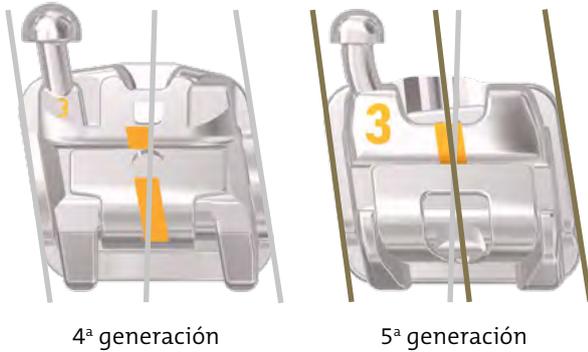

El marcado del centro se mantiene alineado de manera correcta aún estando el clip abierto:

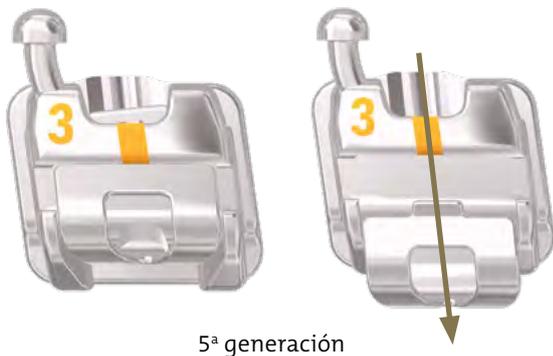

Toda la información sobre pedidos para BioQuick® en prescripción respectiva.



IT'S ALL ABOUT THE CLIP...