



Sprint[®] II Brackets

Probado – ¡Y ahora mucho mejor!

*Diseño mejorado, tamaño habitual.
¡Ahora también disponible en prescripción
McLaughlin / Bennett / Trevisi*

www.forestadent.com

 **FORESTADENT[®]**
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Las ventajas de los nuevos brackets Sprint® II en resumen ...



Los nuevos brackets Sprint® II incluyen invaluable características de su antecesor así como importantes novedades, ambas fusionándose en armonía. Son de ligado convencional y tienen el tamaño habitual, mismo que es del conocimiento de muchos ortodontistas gracias a la versión anterior de brackets Sprint®. Además, la distancia entre las aletas y la base son las mismas. Como resultado, los brackets Sprint® pueden ligarse como de costumbre. Una novedad es el cuerpo del bracket con bordes redondeados y una superficie más suave, lo cual brinda al paciente mayor comodidad. En esta nueva versión, se asegura una mejor adhesión gracias la nueva posición transversal de los dientes de la base anatómica. El borde circunferencial de la base mejora las propiedades adhesivas. Las muescas mesial y distal en la base del bracket, facilitan las tareas de descementación. Los brackets Sprint® II son libres de níquel y están provistos de una marca central ocluso-gingival continua, con la finalidad de facilitar el posicionamiento del bracket en la cementación.



Gracias a la base anatómica dentada, los brackets Sprint® II se adaptan perfectamente a la superficie del diente.


Todo esto hace aún mejor el bracket Sprint® II:

1. Mayor comodidad gracias al cuerpo redondeado y superficies más lisas.
2. La modificación del gancho con un diseño más plano para una mayor comodidad.
3. Marcado central ocluso-gingival continuo, para facilitar el posicionamiento.
4. La nueva base de ganchos anatómica de FORESTADENT con una mejor adherencia gracias a la posición transversal.
5. Descementación más fácil gracias a las muescas mesiales y distales.
6. El borde circunferencial de la base mejora las propiedades adhesivas.
7. Bracket de una sola pieza, libre de níquel así como tamaño y dimensión habitual a los conocidos brackets Sprint®.

Sprint® II Brackets

Sprint® II Brackets – Roth-System

Marca de color

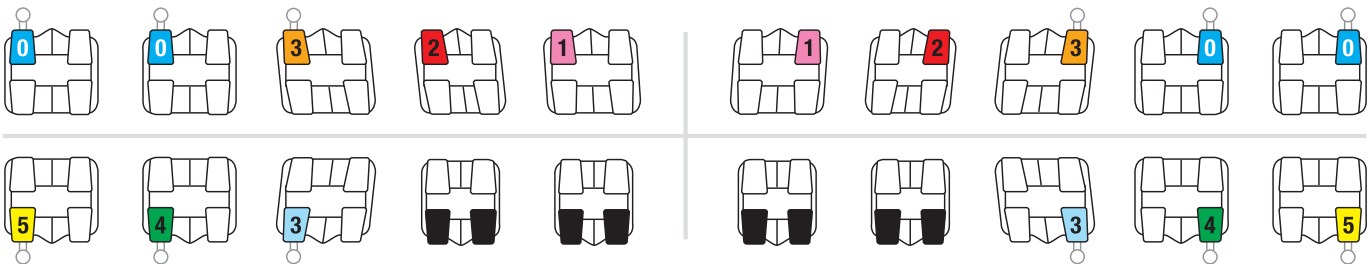

Maxilar					Slot .018"		Slot .022"	
C € 0297					Número de orden		Número de orden	
Diente	Torque	Angulación	In/Out	Rotación	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
1 Centrales	+12°	+5°	1,0	–	786-0103	785-0103	786-0101	785-0101
2 Laterales	+8°	+9°	1,4	–	786-0203	785-0203	786-0201	785-0201
3	Caninos	–2°	+11°	0,8 4° mesial	786-0313	785-0313	786-0311	785-0311
	Caninos + gancho	–2°	+11°	0,8 4° mesial	786-0303	785-0303	786-0301	785-0301
4	Premolares	–7°	0°	0,8 2° distal	786-0513	785-0513	786-0511	785-0511
	Premolares + gancho	–7°	0°	0,8 2° distal	786-0503	785-0503	786-0501	785-0501
5	Premolares	–7°	0°	0,8 2° distal	786-0513	785-0513	786-0511	785-0511
	Premolares + gancho	–7°	0°	0,8 2° distal	786-0503	785-0503	786-0501	785-0501

Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
C € 0297					Número de orden		Número de orden	
Diente	Torque	Angulación	In/Out	Rotación	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
1 Centrales	0°	0°	1,4	–	785-1203	785-1203	785-1201	785-1201
2 Laterales	0°	0°	1,4	–	785-1203	785-1203	785-1201	785-1201
3	Caninos	–10°	+7°	0,8 2° mesial	786-1413	785-1413	786-1411	785-1411
	Caninos + gancho	–10°	+7°	0,8 2° mesial	786-1403	785-1403	786-1401	785-1401
4	Premolares	–17°	0°	0,65 4° distal	786-1513	785-1513	786-1511	785-1511
	Premolares + gancho	–17°	0°	0,65 4° distal	786-1503	785-1503	786-1501	785-1501
5	Premolares	–22°	0°	0,65 4° distal	786-1613	785-1613	786-1611	785-1611
	Premolares + gancho	–22°	0°	0,65 4° distal	786-1603	785-1603	786-1601	785-1601

Caso


C € 0297

Variación	Slot .018"			Slot .022"		
Casos	1	5	10	1	5	10
	706-0636	706-0637	706-0638	706-0651	706-0652	706-0653
	706-0641	706-0642	706-0643	706-0656	706-0657	706-0658
	706-0646	706-0647	706-0648	706-0661	706-0662	706-0663

Sprint® II Brackets

Sprint® Brackets – McLaughlin/Bennett/Trevisi-System

Marca de color

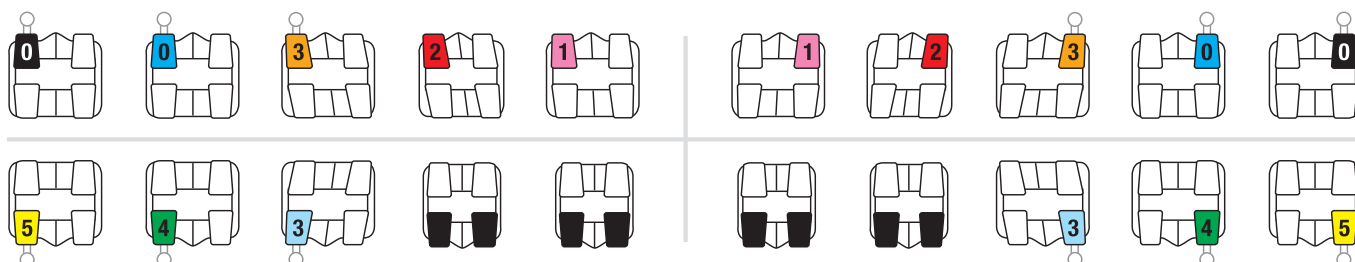

Maxillar CE 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Diente	Torque	Angulación	In/Out	Rotación	Número de orden Derecha	Número de orden Izquierda	Número de orden Derecha	Número de orden Izquierda
1 Centrales	+17°	+4°	1,0	–	799-0103	798-0103	799-0101	798-0101
2 Laterales	+10°	+8°	1,4	–	799-0203	798-0203	799-0201	798-0201
3	Caninos	–7°	+8°	0,8	799-0313	798-0313	799-0311	798-0311
	Caninos + gancho	–7°	+8°	0,8	799-0303	798-0303	799-0301	798-0301
4	Premolares	–7°	0°	0,8	799-0413	798-0413	799-0411	798-0411
	Premolares + gancho	–7°	0°	0,8	799-0403	798-0403	799-0401	798-0401
5	Premolares	–7°	0°	1,2	799-0513	798-0513	799-0511	798-0511
	Premolares + gancho	–7°	0°	1,2	799-0503	798-0503	799-0501	798-0501

Mandibular CE 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Diente	Torque	Angulación	In/Out	Rotación	Número de orden Derecha	Número de orden Izquierda	Número de orden Derecha	Número de orden Izquierda
1 Centrales	–6°	0°	1,4	–	798-1203	798-1203	798-1201	798-1201
2 Laterales	–6°	0°	1,4	–	798-1203	798-1203	798-1201	798-1201
3	Caninos	–6°	+3°	0,8	799-1413	798-1413	799-1411	798-1411
	Caninos + gancho	–6°	+3°	0,8	799-1403	798-1403	799-1401	798-1401
4	Premolares	–12°	+2°	0,65	799-1513	798-1513	799-1511	798-1511
	Premolares + gancho	–12°	+2°	0,65	799-1503	798-1503	799-1501	798-1501
5	Premolares	–17°	+2°	0,65	799-1613	798-1613	799-1611	798-1611
	Premolares + gancho	–17°	+2°	0,65	799-1603	798-1603	799-1601	798-1601

Caso

CE 0297						
Variación	Slot .018"			Slot .022"		
Casos	1	5	10	1	5	10
	706-1300	706-1301	706-1302	706-1309	706-1310	706-1311
	706-1303	706-1304	706-1305	706-1312	706-1313	706-1314
	706-1306	706-1307	706-1308	706-1315	706-1316	706-1317

Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com

FORESTADENT de España, S.L.

Oficina de Madrid: General Rodrigo 6-Edificio Germania-7º Planta · 28003 Madrid
Tel. +34 91 533 16 17 · Fax. +34 91 533 15 67 · E-mail: forestadent@forestadent.es

Oficina de Barcelona: Avda Diagonal 427-1º-2º · 08036 Barcelona
Tel. +34 93 215 30 61 · Fax. +34 93 215 96 38 · E-mail: forestadent.bcn@forestadent.es

www.forestadent.com

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS